


DH36

3-Part Auto Hematology Analyzer



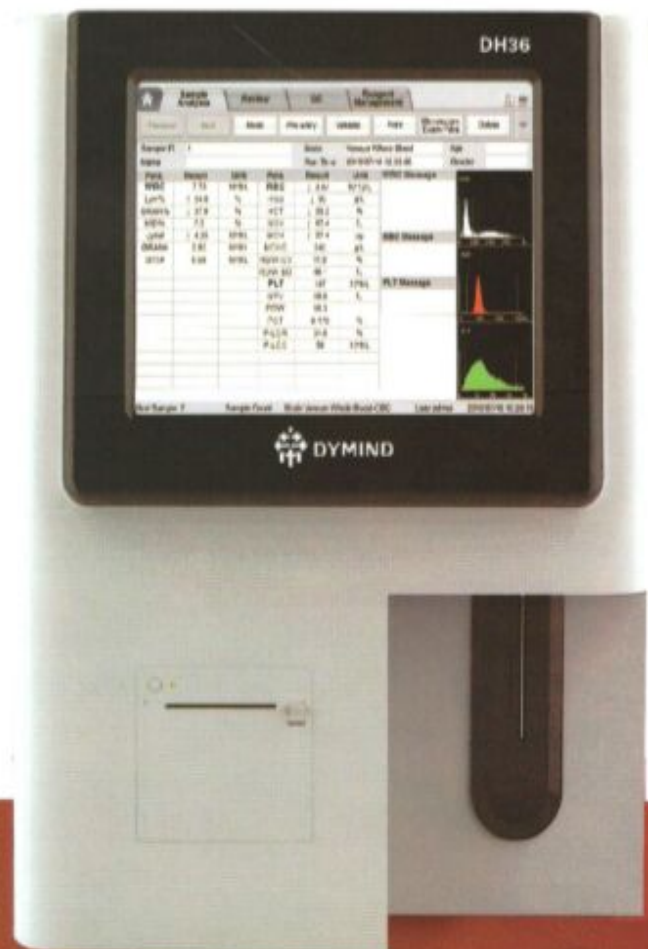

PROFESSIONAL TECHNOLOGY DECIDES QUALITY

SYRINGE MAINTENANCE-FREE

BI-DIRECTIONAL LIS CONNECTION IS SUPPORTED



10.4 inch TFT touch screen, more visible.
Humanized interface, easy operation.



Internal Lyse position.



Excellent repeatability
and wider linearity range.



Build-in thermal printer,
support external printer.

Product Specifications

Throughput:	60 samples/hour.	Sample volume:	Minimum volume 9 ul.	Storage:	50,000 sample results, including parameter, histogram, and patient information.
Detection channel:	Dual-channel for counting.	Counting modes:	Venous whole blood, capillary whole blood, and pre-diluted blood.	Input/output:	4 USB ports and Bi-directional LIS connection.
Leading technology:	Pulse baseline tracking technology, waveform discrimination technology, and intelligent floating threshold technology.	Reference value setting:	Pediatrics, male adult, female adult, general and user-defined.	Operating environment:	Temperature 10°C to 30°C; relative humidity ≤ 85%.
Detection principle:	Impedance method (WBC/RBC/PLT) and cyanide free colorimetric method (HGB).	Alarm system:	Reliable alarm system with customized function.	Power requirement:	100V-240V~; 50/60Hz.
Detection items:	The detection items include 21 parameters: report parameters (WBC, Lym#, Mid#, Gran#, Lym%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, and P-LCC), 3 histograms, alarm for abnormal erythrocytes, leukocyte, and platelet.	Quality control system:	L-J and X-B.	Dimensions:	410mm×353mm×471mm.
		Printout:	Built-in thermal recorder, supports various types of printer. Large numbers of built-in print templates are available.	Weight:	≤25KG.



LAB Market

لاب ماركت

- مستلزمات معملية
- كيموويات
- أجهزة
- صيانة

01096411333

بنها - عمارة ٢ غرب الاستاد - بجوار كنتاكي - خلف نقابة الاطباء - مطعم الرشيدى